


<b>POP 35 – Limpeza e Desinfecção de Almotolias</b>	<b>Data Elaboração:</b> Junho/2020
<b>Responsável</b> Enfermeiro e Técnico de Enfermagem.	
<b>Objetivo</b> Realizar a remoção física por ação mecânica da sujeira, promovendo redução de microrganismos das superfícies das almotolias.	
<b>Material Necessário</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ EPIs;</li><li>▪ Esponja;</li><li>▪ Compressas ou panos limpos;</li><li>▪ Recipiente plástico com tampa;</li><li>▪ Sabão/detergente;</li><li>▪ Água corrente;</li><li>▪ Pinça longa;</li><li>▪ Solução de Ácido peracético 0,25% ou Hipoclorito de sódio 1%;</li><li>▪ Rótulo e fita adesiva.</li></ul>	
<b>Descrição da Atividade</b> <b>Preparo da Solução:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Higienizar as mãos;</li><li>▪ Paramentar-se com os EPIs indicados;</li><li>▪ Preparar a solução com água e detergente;</li><li>▪ Esvaziar as almotolias;</li><li>▪ Lavar interna e externamente, incluindo a tampa;</li><li>▪ Enxaguar abundantemente por dentro e por fora, em água corrente;</li><li>▪ Colocar as almotolias e tampas para escorrer sob um pano limpo e seco e/ou papel toalha;</li><li>▪ Imergir as almotolias em solução de ácido peracético 0,25% ou hipoclorito de sódio 1%, durante 30 minutos;</li><li>▪ Retirar da solução e enxaguar rigorosamente em água corrente.</li><li>▪ Deixar escorrer sobre um pano limpo ou papel toalha, até secar.</li><li>▪ Reabastecer para uso;</li><li>▪ Rotular a almotolia.</li></ul>	
<b>Observações</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ A quantidade de solução na almotolia deve ser suficiente apenas para uso diário ou semanal;</li><li>▪ Nunca reabastecer as almotolias sem limpeza e desinfecção prévia;</li><li>▪ O processo de limpeza e desinfecção deve ocorrer no mínimo a cada 7 dias.</li><li>▪ Sempre identificar a almotolia com rótulo padrão, disponibilizado pelo SESMT. Na sua indisponibilidade, utilizar etiqueta de papel contando todas as informações conforme figura ao lado.</li></ul>	

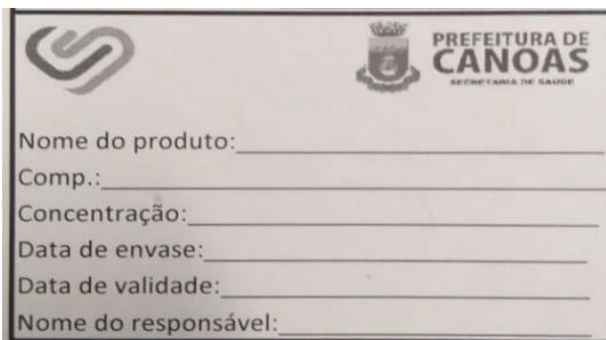

Nome do produto: \_\_\_\_\_  
Comp.: \_\_\_\_\_  
Concentração: \_\_\_\_\_  
Data de envase: \_\_\_\_\_  
Data de validade: \_\_\_\_\_  
Nome do responsável: \_\_\_\_\_

#### Referências

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Segurança do Paciente em Serviços de Saúde: limpeza e desinfecção de superfícies. Brasília: ANVISA, 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA. Secretaria Municipal de Saúde. Procedimento Operacional Padrão: Desinfecção e Esterilização para os Serviços de Saúde, 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE. Secretaria Municipal da Saúde. Protocolos Operacionais Padrão de Enfermagem. Porto Alegre/RS, 2018.

GRAZIANO, K. U.; SILVA, A.; PSALTIKIDIS, E. M. Enfermagem em Centro de Material e Esterilização. Barueri: Manole, 2011.

#### **Elaboração**

Rita Daniele Pitthan Dias  
COREN-RS 164504

Karim Sabrina Correa Wilbert  
COREN-RS 355149

#### **Revisão**

Marcia de Oliveira  
COREN-RS 324470

#### **Aprovação**

Janaína Zatti  
COREN-RS 233736