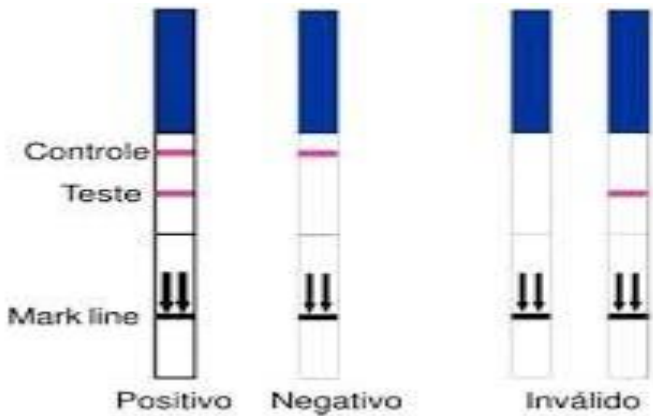



<p align="center"><b>POP 36 – Teste Rápido de Gravidez</b></p>	<p align="center"><b>Data Elaboração:</b> Julho/2020</p>
<p><b>Responsável</b> Enfermeiro e Técnico de Enfermagem.</p>	
<p><b>Objetivo</b> Diagnóstico precoce da gravidez.</p>	
<p><b>Material Necessário</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Luva de procedimento;</li> <li>▪ Frasco limpo e seco de plástico ou vidro, sem nenhum conservante;</li> <li>▪ Tiras reagentes para Teste Rápido HCG urinário;</li> <li>▪ Relógio ou cronometro.</li> </ul>	
<p><b>Descrição da Atividade</b></p> <p><b>Preparo da Solução:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Se certificar que a usuária possui atraso menstrual de pelo menos 7 dias;</li> <li>▪ Higienizar as mãos;</li> <li>▪ Reunir o material;</li> <li>▪ Calçar as luvas de procedimento;</li> <li>▪ Entregar o frasco e orientar a usuária, encaminhando ao sanitário para coleta;</li> <li>▪ Orientar a paciente a coletar uma pequena amostra de urina;</li> <li>▪ Receber o frasco com a urina e proceder a realização do teste: mergulhe a tira reagente na posição vertical até a marca indicada (“Mark line”) e retire após 10 - 15 segundos;</li> <li>▪ Coloque a tira reagente em uma superfície plana não absorvente, inicie o cronômetro e aguarde que a(s) linha(s) colorida(s) apareça. Leia o resultado em 5 a 10 minutos (atentar para recomendação conforme fabricante).</li> <li>▪ Interprete o resultado:  <b>Negativo:</b> aparece apenas uma faixa na região do controle.  <b>Positivo:</b> aparecem duas faixas iguais e separadas de cores na região do controle e do teste;</li> </ul> <div style="text-align: center;">  <p>Controle Teste Mark line</p> <p>Positivo    Negativo    Inválido</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Explicar o resultado para a paciente;</li> <li>▪ Desprezar os materiais utilizados nos lixos apropriados;</li> <li>▪ Retirar as luvas de procedimento e higienizar as mãos;</li> <li>▪ Realizar registro no prontuário físico ou eletrônico, carimbar e assinar.</li> </ul>	

### Observações

- Se **teste positivo**, agendar consulta de pré-natal ofertar testes rápidos (Sifilis, HIV e hepatites virais).
- Se **teste negativo**, orientar retorno em 48 ou 72 horas e repetir o teste com a primeira urina da manhã. Se após a segunda coleta o teste continuar negativo e persistindo o atraso menstrual, deve ser solicitado o exame BHCG (coleta de sangue no laboratório), orientar retorno com resultado. Ofertar testes rápidos (Sifilis, HIV e hepatites virais);
- A intensidade da cor das faixas do teste pode variar visto que estágios diferentes da gravidez têm concentrações diferentes do hormônio de HCG.
- O enfermeiro deve estar atento a mudanças de marca utilizada e, após leitura da bula, capilarizar possíveis mudanças à equipe.
- A entrega do teste deve ser associada à realização de orientação sobre os possíveis resultados e a disponibilidade dos testes para DST/HIV e hepatites virais e métodos de planejamento reprodutivo.
- O laudo, conforme modelo padrão disponibilizado pela SMS, pode ser atestado somente pelo enfermeiro e poderá ser entregue mediante apresentação de documento com foto.

	<b>Secretaria Municipal de Saúde</b> <b>Resultado do Teste Rápido de Gravidez</b>
UBS: _____	Carimbo da UBS
Nome: _____	
Data: _____	Lote/marca _____
Resultado: ( ) POSITIVO ( ) NEGATIVO	
Orientações: ( ) Repetir teste em 15 dias	
( ) Agendar consulta médica	
( ) Iniciar Pré-Natal	
( ) Outra: _____	
Assinatura e carimbo do profissional:	

### Referências

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Teste rápido de gravidez na Atenção Básica: guia técnico. Disponível em: [http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/teste\\_rapido\\_gravidez\\_guia\\_tecnico.pdf](http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/teste_rapido_gravidez_guia_tecnico.pdf)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE. Secretaria Municipal da Saúde. Protocolos Operacionais Padrão de Enfermagem. Porto Alegre/RS, 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS. Secretaria Municipal de Saúde. Manual de Procedimentos Operacionais Padrão (POP) de Enfermagem. Campinas/SP, 2016.

#### Elaboração

Marcia de Oliveira  
COREN-RS 324470

Rita Daniele Pitthan Dias  
COREN-RS 164504

#### Revisão

Virginia da Silva Acunha  
COREN-RS 422558

#### Aprovação

Janaína Zatti  
COREN-RS 233736